


# Simport **UriFlex™**

**Libérez de l'espace de stockage avec l'UriFlex™**

**Sac de collection flexible UriFlex™ 24 heures**

Le sac de collection est plat lorsqu'il est vide et facile à ranger. Lors de son utilisation, la conception autoportante reste droite et stable, nécessitant un minimum d'espace dans un réfrigérateur.

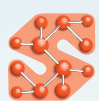

**Simport**  
Scientific inc.

Depuis 1975

Une entreprise  familiale Canadienne

[simport.com](http://simport.com)

# Une manière très discrète d'utiliser et de transporter votre échantillon

**24 HR URINE COLLECTION**  
PATIENT INFORMATION  
**RECOLECCIÓN DE ORINA 24 HORAS**  
REGISTRO DE PACIENTE

PATIENT NAME — NOMBRE PACIENTE  
.....

REFERENCE # — # REFERENCIA      DATE OF BIRTH - FECHA DE NACIMIENTO  
.....

PRESERVATIVE ADDED — CONSERVANTE AÑADIDO  
.....

TOTAL VOLUME COLLECTED — VOLUMEN FINAL  
.....

**COLLECTION START TIME — FECHA DE INICIO :**  
.....

HOUR — HORA      DATE — FECHA  
.....

**COLLECTION END TIME / FECHA DE FINALIZACIÓN :**  
.....

HOUR — HORA      DATE — FECHA  
.....

Réduit la quantité de déchets par rapport aux CONTENANTS rigides

Bec verseur rotatif  
Fermeture en polypropylène  
et bec en polyéthylène

L'entonnoir à contour anatomique est idéal pour les personnes ayant des problèmes de santé ou des déficiences.

Zone d'identification du patient

Grande poignée

Ouverture de 50 mm de large

Le sac est fait de matériaux résistant aux UV, ce qui le rend approprié pour les tests analytes sensibles à la lumière

Film plastique stratifié co-extrudé épais et résistant qui ne se déchire pas, ne se plisse pas et ce même sous un poids qui est lourd ou avec un stress important.

Extérieur en PET  
Intérieur en PE

Le sac autoportant permet à celui-ci de rester debout lorsqu'il est plein



Coulée sans gouttes à débit contrôlé

**Dimensions:** - Vide: 33 cm x 26,5 cm H.  
- Complet (approximatif): 29 cm x 16 cm x 25 cm H.

- ouverture de 50 mm de large
- Poids à vide de 64 g (± 1 g)
- Pas de graduations, le volume de liquide doit être déterminé en poids



No Cat.	Description	Vol. (L)	Qté/Cs
B351-4	Sac de collection flexible UriFlex™ 24 heures	4	30
B351-4FU	Entonnoir pour UriFlex™ 24 heures		30



2588 Bernard-Pilon  
Beloeil, Québec  
J3G 4S5  
Canada

T-450 464-1723  
F-450 464-3394  
info@simport.com  
www.simport.com

Distribué par :